

# Cómo hacerse la prueba COVID-19


Usando el kit *QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test*

## SOBRE ESTA PRUEBA

Esta es una guía simplificada para usar la prueba *QuickVue At-Home OTC COVID-19*. Para una información completa, consulte las **Instrucciones del usuario** y la **Hoja de información del paciente** incluidas con la prueba. Este producto tiene autorización de uso de emergencia de la FDA.




Para ver un video de cómo hacer la prueba, vaya a:  
[quickvueathome.com/#video\\_testkit-2](https://quickvueathome.com/#video_testkit-2)

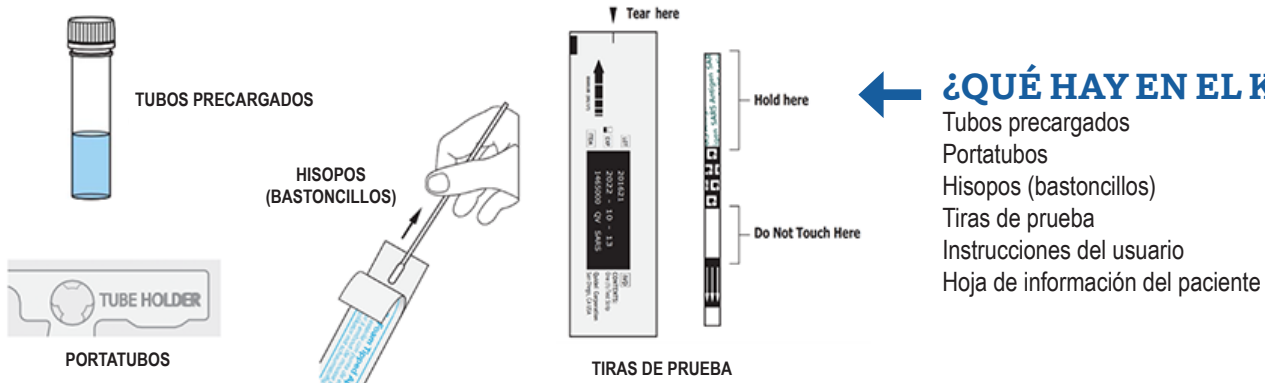

## ¿NECESITA ALGO MÁS?

Un reloj o cronómetro (temporizador), no incluidos en el kit. ¡Medir el tiempo con exactitud es muy importante para esta prueba!

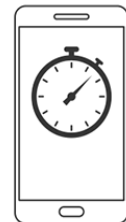

## PARA COMENZAR LA PRUEBA


Lávese las manos y coloque el kit sobre una superficie plana y limpia. Asegúrese de que haya buena luz en la habitación. Si le está haciendo la prueba a otra persona, use una **máscara facial**. Abra el kit y asegúrese de que todos los componentes enumerados anteriormente estén allí. Tome su reloj o cronómetro y siga las instrucciones paso a paso en el otro lado de esta página.



# La prueba, paso a paso

1

Destape uno de los tubos y colóquelo en el portatubos.

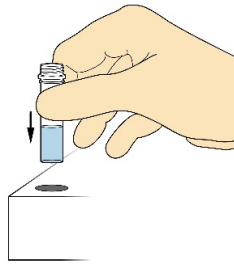

¡NO TOQUE LA CABEZA DEL HISOPO!


2

Saque el hisopo (bastoncillo) de su envoltorio. ¡No toque la cabeza del hisopo!




3

Inserte el hisopo de ½ a ¾ de pulgada en una fosa nasal y frótelo alrededor de las paredes internas al menos 4 veces. **Usando el mismo hisopo**, repita en la otra fosa nasal. Esto tomará alrededor de 15 segundos.

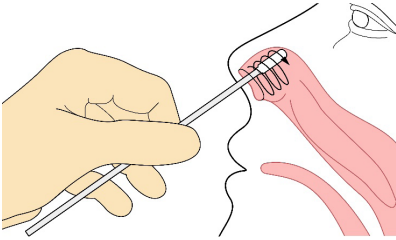


4

En cuanto obtenga la muestra de la nariz, coloque el hisopo en el tubo abierto y asegúrese de que toque el fondo. Revuelva el hisopo 3 o 4 veces.

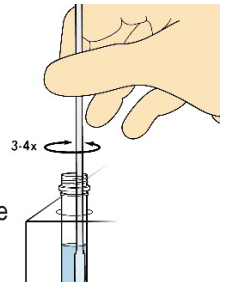

5


Deje el hisopo en el tubo **al menos 1 minuto**. (¡Use un cronómetro o un reloj!) Los resultados de la prueba pueden ser erróneos si deja el hisopo en el tubo por mucho o muy poco tiempo.

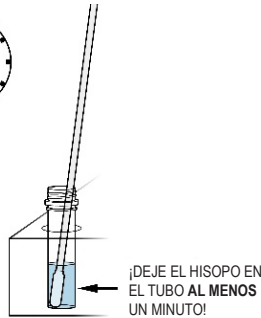

¡DEJE EL HISOPO EN EL TUBO AL MENOS UN MINUTO!

6

Pasado 1 minuto, saque el hisopo del tubo, **frotando su cabeza contra el interior del tubo para exprimir la mayor cantidad de líquido posible**. Deseche el hisopo.

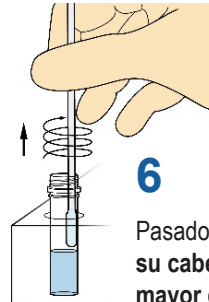


7

Saque una tira de prueba de su envoltorio con mucho cuidado y póngala en el tubo abierto con **las flechas apuntando hacia abajo**. Deje la tira en el tubo por **10 minutos**. (¡Use el cronómetro o el reloj!)




¡DEJE LA TIRA EN EL TUBO AL MENOS 10 MINUTOS!

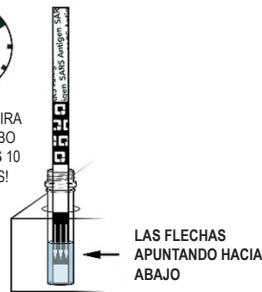

LAS FLECHAS APUNTANDO HACIA ABAJO


8

**Pasados los 10 minutos**, saque la tira de prueba del tubo y colóquela sobre una superficie plana con buena iluminación. **¡Lea la tira de inmediato!** Si espera más de 5 minutos para leerla, es posible que obtenga resultados incorrectos o no válidos.

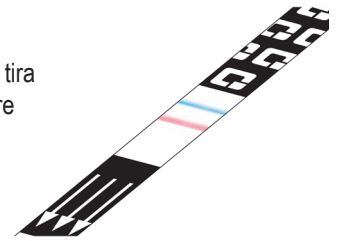

## Leyendo los resultados de la prueba


Hay 3 tipos de resultados posibles: **Positivo**, **Negativo** o **No válido** (la prueba no puede usarse).

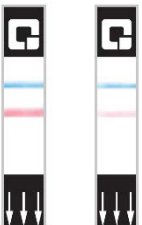

**RESULTADO POSITIVO = 1 línea rosa + 1 línea azul**  
Es **muy probable** que tenga COVID-19. **Debería autoaislarse**. Si tiene síntomas que le molestan o le preocupan, comuníquese con su proveedor de salud.



**RESULTADO NEGATIVO = 1 línea azul**  
Es **poco probable** que tenga COVID-19. Pero si tiene síntomas que le molestan o le preocupan, comuníquese con su proveedor de salud.

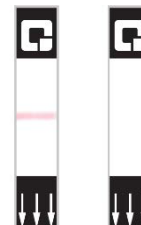

**RESULTADO NO VÁLIDO = 1 línea rosa o NO líneas**  
Necesita hacerse otra prueba. Comience desde el principio con un tubo, un hisopo y una tira de prueba nuevos. Si tiene 2 resultados no válidos, llame al 1-833-784-2588.